



Worek urostomijny – otwieranie, zamykanie i łączenie z workiem do zbiórki moczu

Otwórz zatyczkę kranika.

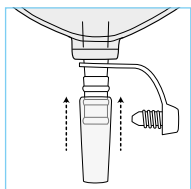


Podłącz łącznik do kranika.

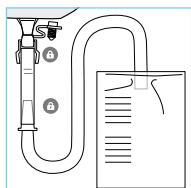

Podłączenie worka do zbiórki moczu.

Po podłączeniu łącznika do kranika, podłącz worek do zbiórki moczu do łącznika.

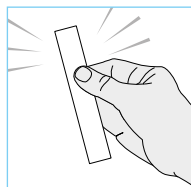

Zachowaj łącznik po każdym odłączeniu worka do zbiórki moczu.



Odklejanie

Aby delikatnie odkleić worek, zastosuj spray do usuwania przylepca Niltac™. Spryskaj brzegi przylepca i odczekaj kilka sekund, aby delikatnie odkleić go od skóry.

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MOŻESZ DO NAS ZADZWOŃCIĆ!

Bezpłatny numer linii informacyjnej

800 120 093

(pon. - pt., 9.00 - 17.00).

Numer dyżurny **608-555-536*** działający:
od poniedziałku do piątku w godzinach **17.00 - 22.00**
sobota i niedziela w godzinach **10.00 - 15.00**

* Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Esteem® worek urostomijny



- Przylepiec z materiału Stomahesive®
- Do wycinania lub z gotowym otworem

Rozmiar stomii (mm)	Kolor	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP	Liczba sztuk w opak.
13-45	przezroczysty	401232	1172291	10
13-45	beżowy	401233	1172292	10
25	beżowy	401241	1172237	10
30	beżowy	401245	1172238	10

Stomadress® Plus worek urostomijny



- Przylepiec z materiału Stomahesive®
- Do wycinania lub z gotowym otworem

Rozmiar stomii (mm)	Kolor	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP	Liczba sztuk w opak.
19	przezroczysty	64927	1076307	10
25	przezroczysty	64928	1076308	10
32	przezroczysty	64929	1076309	10
38	przezroczysty	64930	1076310	10

Stomadress® Plus worek Stomakap



- Worek zamknięty
- Przylepiec z materiału Stomahesive®
- Z filtrem
- Do wycinania

Rozmiar stomii (mm)	Kolor	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP	Liczba sztuk w opak.
19-50	beżowy	175611	1189357	30