



## ADVAN Stapler skórny



**WYTWÓRCA:** Ningbo Advan Electrical co  
**DYSTRYBUTOR:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**KONTAKT:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

### ZASTOSOWANIE:


- Szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie chirurgii
- Przeznaczony do wygodnego, ekonomicznego i pewnego zamykania ran skóry
- Urządzenie jest proste w obsłudze i pozwala bardzo szybko zamknąć ranę
- Zszywanie ran staplerem ułatwia gojenie, przyspiesza zabliznianie rany i pozostawia mniejsze blizny



### WŁAŚCIWOŚCI:

- łatwość stosowania
- anatomiczny kształt ułatwia operowanie staplerem
- zszywanie ran staplerem pomaga zapobiegać zakażeniom krzyżowym
- dzięki nowej strukturze i bezpieczeństwu aplikacji stapler skórny znacząco przyspiesza procedurę szycia rany podczas operacji, powoduje niewielką reakcję histologiczną
- usuwanie zszywek rozszywaczem jest bezbolesne
- materiał rękojeści sztaplera- kompilacja ABSu i PVC
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin przydatności do użycia 3 lata

KOD	MODEL	
	F-35R	F-35W
Materiał zszywki	Stal nierdzewna klasy medycznej	Stal nierdzewna klasy medycznej
Średnica zszywki	Ø0,5	Ø0,6
Wymiary zszywki po założeniu	5,9x3,9mm (szer/wys)	7,2x4,9mm (szer/wys)
Siła zrywu zszywki	≥4N	≤4N
Ilość zszywek	35 szt	35szt
Opakowanie	5 szt. w opakowaniu jednostkowym/ 20 opakowań w kartonie	

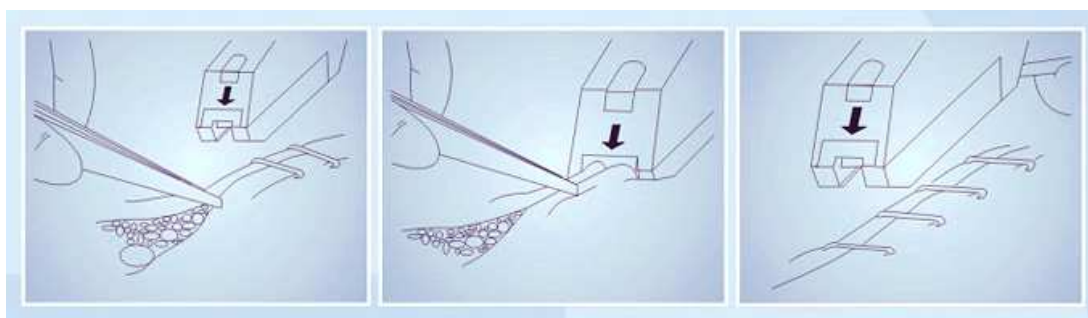

#### INSTRUKCJA UŻYCIA:

- zbliżyć dwie strony nacięcia skórniego za pomocą pęsety
- zacisnąć tkankę pęsetą tak aby obydwie strony równolegle przylegały do siebie
- upewnić się, że dolna część staplera jest ustawiona odpowiednim rogiem do środka rozcięcia, a spinka znajduje się pionowo do podłużnej osi rany
- przyłożyć stapler do rany aby strzałka z przodu staplera znajdowała się po środku cięcia
- UWAGA: nie należy przyciskać staplera mocno do rany, gdyż może to spowodować trudności przy usuwaniu zszywek
- ścisnąć uchwyt i nie puszczać aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia
- odsunąć stapler od miejsca zszycia i przesunąć do następnego miejsca
- maksymalna siła zszywania nie powinna przekroczyć 55 N

#### OSTRZEŻENIA:

- nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- urządzenie powinno być używane przez wykwalifikowany personel medyczny.
- jednorazowy stapler skórny jest używany do szycia ran, zabrania się używania staplera skórniego jeśli odległość między rozcięciem, a ważnymi histiocytami wynosi mniej niż 5mm.
- jeśli warstwa podskórna pod rozcięciem jest za cienka zaleca się przeprowadzenie najpierw zszycia warstwy podskórnej, a następnie zszycia skóry przy użyciu staplera.
- odległość między zszywkami powinna wynosić od 5 mm do 10 mm. Proszę używać specjalnego urządzenia do usuwania zszywek, które powinny być usunięte po 7-10 dniach jeżeli zalecenia lekarza nie są inne.
- Nie używać po upłygnięciu terminu przydatności.

# Urządzenie do usuwania zszywek

WYTWÓRCA:	Ningbo Advan Electrical Co., Ltd		
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"><li>Szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie chirurgii</li><li>Przeznaczony do wygodnego, bezbolesnego usuwania zszywek</li></ul>		
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"><li>Anatomiczny kształt ułatwiający operowanie</li><li>Bezbolesne usuwanie zszywek</li><li>Łatwy w użyciu</li><li>Rękojeść wykonana z ABS-u</li><li>Część metalowa wykonana z komponentu 1Cr18Ni9Ti</li><li>Sterylizowany tlenkiem etylenu</li><li>Termin ważności: 5 lat</li><li>Pakowanie: 1 szt papier/folia</li></ul>		
ROZMIAR I KOD:	NUMER KATALOGOWY	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	C-W	20 szt.	10 x 20 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Ningbo Advan Electrical Co., Ltd		



# Szczoteczki chirurgiczne

**DYSTRYBUTOR:** Zarys International Group

**WYTWÓRCA:** Nex Medical, Włochy

## ZASTOSOWANIE:

- chirurgiczne mycie rąk przed zabiegiem operacyjnym
- skuteczne narzędzie w obniżaniu ryzyka związanego z zakażeniami szpitalnymi. Oczyszczenie dłoni przed zabiegiem znacznie zmniejsza liczbę mikroorganizmów znajdujących się na dłoniach i przedramionach

## OPIS PRODUKTU:

- Zaawansowane preparaty o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, drożdży i wirusów
- miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry
- do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu
- miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry
- opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- szybkie działanie: 3 minutowe chirurgiczne mycie rąk bez podrażnienia skóry
- bez zawartości lateksu
- opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika

składa się z 2 stron: gąbka oraz szczoteczka.

## ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Typ	Opakowanie jednostkowe
NEXD1EN044B	sucha	folia / papier
NEXC2EN002B	nasączona 4% roztworem chlorheksydyny	folia
NEXP2EN001B	nasączona 7,5% roztworem jodiny powidonowej	folia



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa


ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland

tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84

[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)



# Szczotka chirurgiczna wielorazowego użytku

WYTWÓRCA:	Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do przedoperacyjnego mycia rąk i skóry w salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych</li> </ul>			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korpus wykonany z nylonu</li> <li>Oszczotkowanie główne i pomocnicze (do mycia opuszków palców i paznokci) wykonane z nylonu</li> <li>Pęczki włosia równomiernie rozłożone, dzięki czemu środek dezynfekujący jest efektywnie rozprowadzany</li> <li>Zastosowane materiały gwarantują skuteczność, komfort mycia, uniemożliwiają osadzanie się zanieczyszczeń i przeciwdziałają rozwijaniu się flory bakteryjnej</li> <li>Niesterylne</li> <li>Przeznaczona do sterylizacji w autoklawie</li> <li>Wielorazowego użytku</li> </ul>			
INSTRUKCJA UŻYCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szczotka niesterylne – przed użyciem należy poddać ją procesowi sterylizacji</li> <li>Po użyciu szczotkę należy umyć, zdezynfekować i wysterylizować w autoklawie</li> </ul>			
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR DŁ. x SZER. x WYS.	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	GDS-1	105 x 42 x 35 mm	12 szt.	20 x 12 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.			



# SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA special sterylna

TD-35

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2020-03-02

zmiana z dnia: 2021-12-22

**WYTWORCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do pobierania wymazu komórek z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ wachlarzyk
- Miękkie zakończenia włóków zapobiegające przed zniszczeniem komórek i bezurazowe pobieranie wymazu
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- Wymiary: Długość szczotki 205mm, długość włókien 27mm, szerokość włosa 20mm
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
SC-002	special	100 szt.	10 x 100 szt.



# SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA standard sterylna

TD-35

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2020-03-02

zmiana z dnia: 2021-12-22

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do pobierania wymazu komórek z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ prosty
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt), stali nierdzewnej (rdzeń) oraz nylonu (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej rączce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

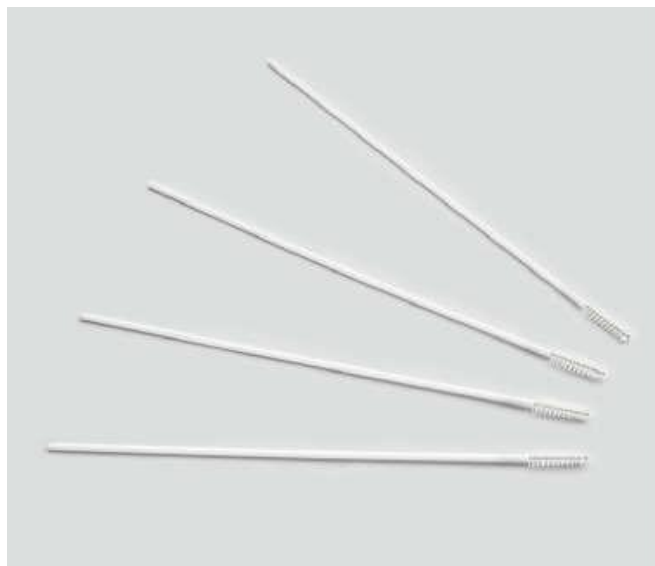

## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
SC-001	standard	100 szt.	10 x 100 szt.



# SZCZOTECZKA GINEKOLOGICZNA standard, sterylna

TD-35

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2020-03-02

zmiana z dnia: 2021-02-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do badania ginekologicznego pochwy i szyjki macicy

## WŁAŚCIWOŚCI:

- łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu
- szpilka blokująca wykonana z polietylenu
- blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby)
- idealnie gładkie i opływowe brzegi łyżek - atraumatyczne
- kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 szt./ folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ROZMIAR	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WG-XXS	16 mm	żółty	XXS	100 szt.
WG-XS	20 mm	biały	XS	100 szt.
WG-S	24 mm	niebieski	S	100 szt.
WG-M	26 mm	czerwony	M	100 szt.
WG-L	30 mm	zielony	L	100 szt.
WG-XL	32 mm	czarny	XL	100 szt.

# KWAS OCTOWY 5% (WODNY) 100 ML

---



## ZASTOSOWANIE

Kwas octowy 5% stosowany do kontrastowania. Służy do próby octowej w kolposkopii. Pozwala wnioskować o zachodzących zmianach na szyjce macicy.

Pojemność 100 ml.

**NR REF:** 02.06.06.03

**PRODUCENT:** ANALAB

## Utrwalacz cytologiczny CYTOFIX 150ml



CYTOFIX jest aerozolowym preparatem do utrwalania pobranych na szkiełka rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną.

Pobrany materiał po użyciu CYTOFIX zostaje pokryty cienką, przezroczystą powłoką ochronną.

Posiada atesty PZH oraz Instytutu Medycyny Pracy

Wydajny - jeden aerozol pozwala na utrwalenie co najmniej 250 rozmazów.

Producent: SAMKO



## **Pojemnik na mocz – kaczka męska 800ml, 1200ml i damska 600ml**

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pojemnik na mocz – kaczka męska (plastikowa) - pomocna w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub półsiedzącej. Podziałka z boku pozwala na odczyt wydalonego moczu.

Brzezi o łagodnych zakończeniach

### **Pojemnik na mocz – kaczka męska 800ml**

kod katalogowy: KM-003

#### **Właściwości:**

Materiał: polipropylen  
Kolor: bezbarwny  
Waga: 90g (z zatyczką)



### **Pojemnik na mocz – kaczka męska 1200ml**

kod katalogowy: KSM-002

Materiał: polipropylen  
Kolor: bezbarwny  
Waga: 90g (z zatyczką)



długości szyjki ok. 8-8,5cm (w zależności od miejsca pomiaru)

długość całkowita ok. 25,5cm, wysokość ok. 15,5cm

### **Pojemnik na mocz – kaczka damska 600ml**

kod katalogowy: KSD-004



Materiał: polipropylen  
Kolor: bezbarwny  
Waga: 130g



# Basen sanitarny plastikowy

- biały

Nr katalogowy: BS-01B



Basen sanitarny (plastikowy) - pomocny w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub pół siedzącej,

## Właściwości:

Materiał: polipropylen

Kolor: biały

Waga: 630g (z pokrywką)


Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze

sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować

powszechnie używanymi do tego celu środkami.



Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

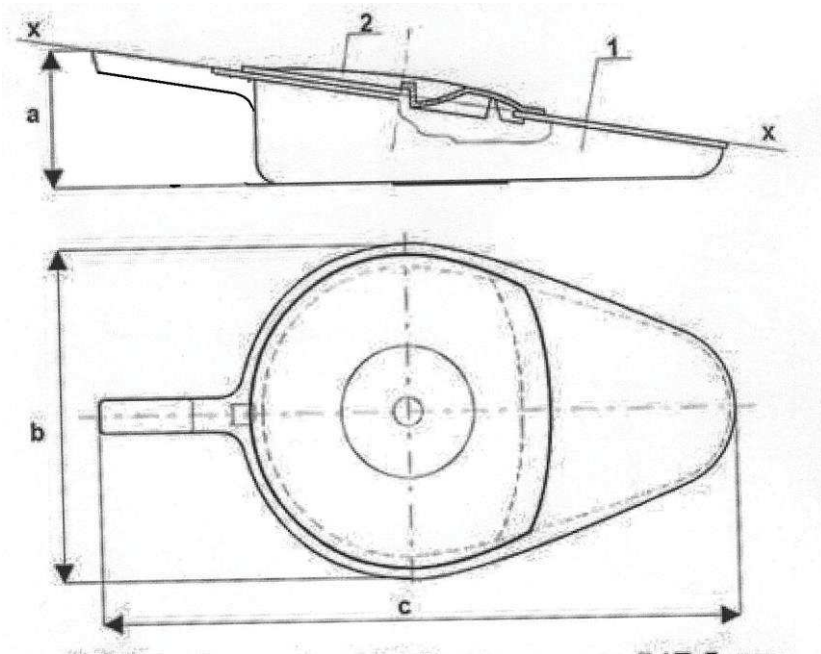

a = 142,0mm b= 299,mm c= 515,0mm

poz. 1 – zbiornik; poz. 2 – pokrywa

rączka – 95 mm

# easyCARE nitrile LONG

## Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpyłowe, z przedłużonym mankietem

ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyrób przeznaczony do diagnostyki pacjenta, zapewniający barierę dla transmisji mikroorganizmów pomiędzy operatorem a pacjentem, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych; wyrób zalecany podczas procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia np. do sterylizatorni</li> </ul>			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tworzywo: 100% nitril (akrylonitryl – butadien)</li> <li>Kolor: niebieski</li> <li>Mankiet: rolowany, przedłużony – długość min. 300mm</li> <li>AQL 1.0</li> <li>powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców</li> <li>Standardy: wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR), Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425</li> <li>Produkt zgodny z wymaganiami norm: EN 455-1:2020 + A1:2022, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, EN ISO 13485:2016 + EN ISO 13485:2016/A11:2021, EN ISO 14971:2019 + EN ISO 14971:2019/ A11:2021, EN 62366-1:2015 + EN 62366-1:2015/A1:2020, EN ISO 15223-1:2021, EN ISO 20417:2021, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013, EN ISO 10993-23:2021, EN ISO 11737-1:2018 + EN ISO 11737-1:2018/A1:2021, EN ISO 374-1:2016 + EN ISO 374-1:2016/A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 21420:2020, EN 16523-1:2015 + A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ASTM F1671, ASTM D6978,</li> <li>System Zapewnienia Jakości: Proces produkcyjny zgodny z US FDA Quality System Regulation (QSR), BS EN ISO 9001 Quality System oraz EN ISO 13485</li> <li>Opakowanie jednostkowe: 100 szt., z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru</li> <li>Opakowanie zbiorcze: 10 opakowań</li> <li>Jednorazowego użytku, Niesterylne</li> <li>Rozmiary: XS - XL</li> </ul>			
ROZMIAR I KOD :	<b>ROZMIAR</b>	<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>SZEROKOŚĆ DŁONI (mm)</b>	<b>DŁUGOŚĆ RĘKAWICY (mm)</b>
	S	RNBPS10001	80 ± 10mm	min. 300mm
	M	RNBPM10001	95 ± 10mm	min. 300mm
	L	RNBPL10001	110 ± 10mm	min. 300mm
	XL	RNBPLX10001	≥110	min. 300mm
GRUBOŚĆ :	<b>MIEJSCA POMIARU</b>		<b>POJEDYNCZA ŚCIANA (mm)</b>	
	palec (13 mm od czubka)		0,16 ± 0,01	
	dłoń (w środkowej części)		0,12 ± 0,01	
	mankiet		0,10 ± 0,01	
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE :	<b>PARAMETR</b>		<b>PRZED STARZENIEM</b>	<b>PO STARZENIU</b>
	Siła zrywająca (N)		10	10
OPAKOWANIE	100szt. w opakowaniu, 10 opakowań w kartonie			



Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

## Pojemniki na odpady medyczne

- Pojemniki na odpady medyczne posiadają atest PZH.
- Są w żółtym, czerwonym lub niebieskim kolorze w zależności od rodzaju zbieranych do nich odpadów.
- Zaopatrzone są w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym (piktogram koloru czarnego na żółto-pomarańczowym tle w formie trójkąta) i instrukcją użytkowania.
- odporne na przekłucia i przemoczenie, zaopatrzone w jednokrotną możliwość zamknięcia, bez możliwości bezuszkodzeniowego otwarcia.

Wymiary pojemników :

Pojemność (litry)	Wysokość (mm)	Średnica górna/dolna (mm)
0,2	130	85-27 / 75-25
0,7	120	Owal 110x60/100x50
1	120	120/110
2	220	120/105
3,5	130	230/200
5	190	230/200
10	245	280/235
20	300	350/300

Otwór wrzutowy o średnicy do 90mm dla pojemników od 1 do 10 litrów; średnica dla pojemnika 0,7l wynosi 40mm; z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki.



**Plaspol sp. z o.o.**  
**Ul. St. Kisielewskiego 45**  
**42-200 Częstochowa**

# ORYGINALNY PAPIER DO VIDEOPRINTERA USG MITSUBUSHI K-61B



Opakowanie: kartonik zawiera 4 rolki  
Rolka: szaro-metaliczna folia  
Rozmiar: 110x20

## Opis techniczny:

Każda oryginalna rolka papieru jest nawinięta na kartonowej rurce pokrytej wewnątrz pianką poliuretanową. Każda rolka oryginalnego papieru posiada wyraźnie widoczny na „bocznej” powierzchni numer serii (oblevu) oraz posiada wyraźne „zaróżowienie” tuż przy powierzchni rurki. Jest to wynik technologicznie naniesionych znaczników wzdłuż krawędzi końcowego odcinka papieru.

Wydruk posiada wyraźną, czarno-białą gradację półtonów. (Nośniki nieautoryzowane dostarczają wydruki w tonacji brązowej)

Wydruki na oryginalnym papierze nie posiadają widocznego szumu

## Od producenta:

**TYLKO UŻYWANIE ORYGINALNEGO NOŚNIKA GWARANTUJE BEZAAWARYJNĄ PRACĘ DRUKARKI PRZY MINIMUM 40.000 WYDRUKÓW.  
ZAPOBIEGA MOZLIWOŚCIOM ELEKTROSTATYCZNEGO USZKODZENIA GŁOWICY TERMICZNEJ URZĄDZENIA.**

Wytwórca: Mitsubishi Electric Corporation


Eksporter: Diagramm Halbach Niemcy

Dystrybutor w Polsce:

G.C.Z.M. „ZARYS” Sp. z o.o.

41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18

# Papier EKG

WYTWÓRCA	AB Medica group s.a. - Lessa			
MARKA	BEXEN	BOSCH-DIMEQ	BURDICK	CARDIO TENICA
MODEL	BEXGRAPH 1C / BEXLINE 1C / REANIBEX 5 / REANIBEX 700 / REANIBEX 800 (reg. XE-50)	EKG 11K / 101K	DC180 / DC185	RG401 / RG401 PLUS
MARKA	CAREWELL	CMICS MEDICAL	COLIN	COMEN
MODEL	ECG-1101G / 1101B	ECG-11A / 11B / 11D / 11D(II)	NBP-30 (ECG&BP)	CM100
MARKA	CONTEC MEDICAL	DATASCOPE	DIMED	EDAN
MODEL	CMS6000 / ECG 100	790 / 2000RS / 2000R / 2000A / 2100 / 2200 / SYSTEMS 90/95 / BALLON PUMP	LTD400	SMART ECG SE-1 / SE-100 / VE-100 VET
MARKA	FUKUDA CARDISUNY	FUKUDA DENSHI	GENERAL ELECTRIC	LOGOS
MODEL	C-110 / CP101 / 501-D / S / SA	FX121 / FX1201 / FJC7110	CARDIAC TRIGGER MONITOR 3150	8821
MARKA	LOHMEIER	MEDITECH	NEW TECH	NIHON KOHDEN
MODEL	LME98/070/13	312	ECG 1100 / 1101 / 1501	CARDIOFAX 6851-K
MARKA	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	PHYSIO-CONTROL
MODEL	ECG2101/MC6/11/12 / ECG5101/5151/1101 / ECG6101/6151/6501 / ECG6511/WT811PA / ECG6551/TEC7000	TEC3500 / TEC7000 / TEC7100 / TEC7200 / TEC7300 / TEC7511 / TEC7521 / TEC7531 / TEC7621 / TEC7631 / TEC7721 / TEC7731 / TEC8300 series	WT311R/612P/613P / WT614P/615P / WT617P/711R	LIFEPAK-6/7/8/9/10/12/20
MARKA	SAN-EI	SECA	SIEMENS	ZOLL
MODEL	ECG 1E21	CARDIOTEST CT1000	CARDIOSTAT-1	4124 / PD1200 / PD1400
NUMER KAT.	<b>10.050.03</b>			
ROZMIAR	50 mm x 30 m			
TYP PAPIERU	QT-HS			
ŚREDNICA WEW.	16 mm			
NAWÓJ	wewnętrzny			
AUTOMATYZM	nie			
KOLOR NADRIKU	czerwony			
				
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	AB Medica group s.a. - Lessa			



# Papiery EKG




WYTWÓRCA:	Papiery Powlekane „PASACO” Sp. z o.o., ul. Toruńska 63a, 86 – 050 Solec Kujawski				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestracja zapisu EKG</li> </ul>				
WŁAŚCIWOŚCI:	<p><b>Papier w roli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oferujemy bezpyłowe papiery termiczne, z nadrukiem podziałki milimetrowej</li> <li>• papiery białe typu CB, CFB, CF w gramaturach 50 – 170 g</li> <li>• papiery CFB i CF w kolorze żółtym, różowym, niebieskim, zielonym</li> <li>• papiery specjalistyczne typu SC, SC/CB</li> <li>• papier biały OCR CB oraz OCR CF</li> <li>• papiery w rolach mogą być różnej szerokości - maksymalnie 140cm, oraz różnej długości nawoju zgodnie z życzeniami klientów, np. 7000m, 10500m</li> </ul> <p><b>Papier w arkuszach</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podstawowym produktem są arkusze w formacie A2 (610x430), ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów produkujemy też inne formaty</li> <li>• papier biały typu CB, CFB, CF w gramaturach 50 - 170 g</li> <li>• papiery CFB i CF w kolorze żółtym, różowym, niebieskim, zielonym</li> <li>• papiery OCR CB, OCR CF, SC, SCCB</li> </ul>				
ROZMIAR I KOD:	KOD	NAZWA	ROZMIAR	NADRUK	OPAKOWANIE HANDLOWE
	12805	Papier EKG Ascard A33	110x10	TAK	5 szt.
	12806	Papier EKG Ascard A3	104x40	NIE	5 szt.
	12807	Papier EKG Ascard A4/B56	112x25	TAK	5 szt.
	12808	Papier EKG FARUM E-600	110x35	TAK	5 szt.
	12830	Papier EKG Ascard B5	60x25	TAK	10 szt.
	12834	Papier EKG Ascard E-300	110x40	TAK	5 szt.
	12842	Papier EEG 16-kanałowy	420x300x2000	NIE	1 szt.
	12850	Papier EEG 16-kanałowy	420x300x2000	TAK	1 szt.
	13588	Papier EKG Ascard B5 ECO, Ascard Mr. Green	58x25	TAK	10 szt.
	13593	Papier EKG Ascard 3	104x40	TAK	5 szt.
	14430	Papier EKG Ascard 31	60x12	TAK	10 szt.
	14431	Papier EKG Ascard 612	210x40	TAK	5 szt.
	18550	Papier EKG Ascard E-30	100x40	TAK	5 szt.
	20570	Papier EKG Lifepack 11	107x23	TAK	5 szt.
	21420	Papier termoczuły do drukarek lab.	57x30	NIE	10 szt.
	21423	Papier termoczuły do drukarek lab.	110x20	NIE	5 szt.
	21424	Papier termoczuły do drukarek lab.	110x30	NIE	5 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: „PASACO” Sp. z o.o., ul. Toruńska 63a, 86 – 050 Solec Kujawski				
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny					






data opracowania: 2023.11.22



**CEWNIKI REKTALNE I KANKI DOODBYTNICZE**  
**Rectal catheters and rectal tubes**  
**Ректальные катетеры и ректальные зонды**

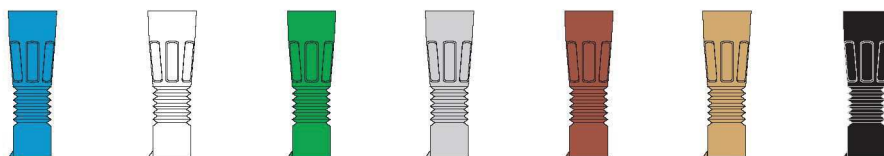

-  • wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
  
-  • made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter
  
-  • изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера



Cewniki rektalne Rectal catheters Ректальные катетеры	Długość Length Длина mm							
		8,0 mm	8,7 mm	9,3 mm	10,0 mm	10,7 mm	11,3 mm	12,0 mm
		CH 24	CH 26	CH 28	CH 30	CH 32	CH 34	CH 36
		Numer katalogowy		Reference number		Номер каталожный		
	400	632404000	632604000	632804000	633004000	633204000	633404000	633604000

Kanki doodbytnicze Rectal tubes Ректальные зонды	Długość Length Длина mm								
		4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	9,3 mm	10,0 mm
		CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 28	CH 30
		Numer katalogowy		Reference number		Номер каталожный			
	200	641402000	641602000	641802000	642002000	642202000			
	250	641402500	641602500	641802500	642002500	642202500	642402500		
	300	641403000	641603000	641803000	642003000	642203000	642403000	642803000	643003000
	400	641404000	641604000	641804000	642004000	642204000	642404000	642804000	643004000
	600	641406000	641606000	641806000	642006000	642206000	642406000	642806000	643006000



# WOREK DO LEWATYWY sterylny

TD-33

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2018-04-17

zmiana z dnia: 2021-12-22

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- worek umożliwia wprowadzenie przez odbyty płynu do jelita grubego w celu usunięcia mas kałowych i pobudzenia ruchu perystaltycznego jelit

## WŁAŚCIWOŚCI:

- worek o pojemności 1750 ml z dwoma otworami do zawieszenia
- wykonany z medycznego PVC
- skalowany od 50 ml do 1750 ml
- skala linearna co 100 ml cyfrowa co 200 ml
- dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym
- końcówka drenu zabezpieczona zatyczką
- górną część worka wzmocnioną dodatkowym kołnierzem stabilizującym wlot podczas wypełniania płynem
- kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/ folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY

WLS


OPAKOWANIE  
JEDNOSTKOWE

1 szt.

OPAKOWANIE  
TRANSPORTOWE

150 szt.

# Fartuch foliowy

PRODUCENT:	Zhangjiagang Huaxing Rubber-Plastic Products CO., LTD					
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyrób przeznaczony dla personelu medycznego jako dodatkowe zabezpieczenie przy wykonywaniu mokrych zabiegów, takich jak przygotowywanie leków, mycie pacjenta, karmienie</li> </ul>					
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonany z polietylenu</li> <li>przezroczysty</li> <li>zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki</li> <li>zarejestrowany jako wyrób medyczny</li> <li>pakowany indywidualnie po 1 szt.</li> <li>dostępne rozmiary: 71x116 cm, 71x180 cm</li> <li>niejałowy</li> </ul>					
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	GRUBOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	HXA0001	71x116 cm	20 μm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
	HXA0002	71x180 cm	20 μm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
	HXA0003	71x116 cm	30 μm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Zhangjiagang Huaxing Rubber-Plastic Products CO., LTD					



# Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, wzmocnione, niejałowe

TD-32-I.2.c-1.1.4

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na materace, kozetki, fotele i itp. w celu ochrony pacjenta w trakcie procedur medycznych, zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta ze względu na jego stan zdrowia

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonane z papieru laminowanego folią
- wzmocnione 8 lub 48 nitkami
- gramatura 40 g/m<sup>2</sup> (23 g/m<sup>2</sup> papier, 17 g/m<sup>2</sup> folia)
- miękkie, wodoodporne, chłonne, wytrzymałe
- kolor biały z niebieskimi nitkami
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat

8 nitek



48 nitek



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ	WYMIARY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-PW101	8 nitek	80 x 210 cm	25 szt.	4 x 25 szt.
BT-PW401	48 nitek	80 x 210 cm	25 szt.	4 x 25 szt.



# Chusta trójkątna, włókninowa niesterylna elastoSLING

TD-08-I.2.c-1.2

wydanie I

data 2021-05-26

zmiana z dnia: 2021-12-22

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- przeznaczona do tymczasowego unieruchomienia i odciążenia kończyn w przypadku wszelkich urazów lub do podtrzymywania różnych opatrunków nieprzyklepanych na ranie

**WŁAŚCIWOŚCI**

- chusta w kształcie trójkąta wykonana z włókniny polipropylenowej
- cienka, lekka i elastyczna - wygodna dla pacjenta, dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu
- możliwość połączenia kilku chust celem uzyskania większego unieruchomienia
- hipoalergiczna
- jednorazowego użytku
- niejałowa
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) WOREK STRUNOWY	OPAKOWANIE POŚREDNIE WOREK FOLIOWY	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
CHTW9696136	96 cm x 96 cm x 136 cm	1 szt.	12 x 1 szt.	20 x 12 szt.



## *Prześcieradło papierowe 50/50 2 warstwowe*



- 100% celulozy
- gramatura 2 x 17 g/m<sup>2</sup>
- dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, super białe
- szerokość roli 50 cm
- długość 50 m, perforacja co 37,5 cm
- przeznaczone do gabinetów lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych itp.
- wyrób medyczny
- nr katalogowy 1.06.005

Producent:

Flesz Sp. z o. o.

ul. Cieślowskich 25F

03-017 Warszawa



Higieniczne podkłady ochronne, wykonane są z dwóch warstw chłonnej bibuły i warstwy folii. POCOS38-P50-D40B

1. szerokość 38cm, perforacja co 50 cm
2. 80 podkładów na rolce, długość 40m
3. Kolor biały



\*Istnieje możliwość zmiany rozmiaru perforacji oraz długości wstęgi na rolce

Producent: F.P.H. MUSTAF s.c.



## Podkład chłonny

TD-03-I.2.c-1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku służy do pochłaniania moczu i innych płynów ustrojowych. Stosowany na łóżku medycznym w celu bezpośredniego zabezpieczenia i ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniami i zakażeniami

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wkład chłonny pikowany
- złożony w warstw: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa, warstwa celulozowa, folia PE
- wkład chłonny w kolorze białym
- warstwa foliowa w kolorze niebieskim
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	RODZAJ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
BT-PC4060	40 x 60 cm	biały/ niebieski	folia	25 szt.	4 x 25 szt.
BT-PC6090	60 x 60 cm	biały/ niebieski	folia	25 szt.	4 x 25 szt.
BT-PC6090	60 x 90 cm	biały/ niebieski	folia	25 szt.	4 x 25 szt.



# OPASKA IDENTYFIKACYJNA

TD-22-I.2.c-1

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób jednorazowego użytku stosowany do identyfikacji i podawania podstawowych informacji o pacjencie w celu zapobiegania błędom medycznym i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.

## WŁAŚCIWOŚCI

- trwała opaska na nadgarstek charakteryzująca się dużą odpornością na wilgoć, działanie mydeł, środków do dezynfekcji rąk i innych cieczy stosowanych w szpitalach
- wykonana z miękkiego i delikatnego winylu
- elastyczna, delikatna, lekka i łatwa w użyciu
- zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- oznaczenie kolorystyczne w zależności od przeznaczenia
- jednorazowe, łatwe zatrzaskowe zapięcie zabezpieczające przedprzypadkowym otwarciem
- dostępna w wersji z szerokim polem do opisu bezpośrednio na opasce oraz z wkładaną karteczką (np. na wpisanie imienia i nazwiska, nr PESEL oraz daty i godziny)
- niealergizująca
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	KOLOR	TYP	OPAKOWANIE	
OPD-B-01	dzieci i dorośli	biały	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPD-B-02	dzieci i dorośli	biały	z polem do opisu	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPN-R-01	noworodki	różowy	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPN-N-01	noworodki	niebieski	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)

REF	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	SZEROKOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ (mm)	SZEROKOŚĆ CZĘŚCI REGULACYJNEJ (mm)
OPD-B-01	250	25	13
OPD-B-02	250	25	13
OPN-N-01	170	18	11
OPN-R-01	170	18	11

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

strona 1 / 1



Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

# Kruszarka do leków

WYTWÓRCA:	Hammarplast Medical AB, Szwecja			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozdrabnianie, rozkruszanie leków (tabletek)</li> </ul>			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz estetycznym i nowoczesnym wyglądem</li> <li>wykonana z wytrzymałych materiałów - poliamidu (PA07) oraz stali nierdzewnej</li> <li>umożliwia profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych</li> <li>dzięki swojej budowie zapewnia ochronę i bezpieczeństwo leków w trakcie rozkruszania</li> <li>ergonomiczny kształt pozwala na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem</li> <li>zastosowany system pozwala uniknąć strat i mieszania się leków od różnych pacjentów</li> <li>łatwa do utrzymania w czystości</li> <li>wyrób wielorazowego użytku (bez możliwości poddawania procesowi sterylizacji)</li> </ul>			
PAKOWANIE:	KOD	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	300280	1 sztuka	10 sztuk	5 x 10 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Hammarplast Medical AB			



# Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków

WYTWÓRCA:	Conall Health Co., Limited, Room 112, Building 2, No. 561 Hangnan Road, 200137 Shanghai				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Igła wykonana jest z wysokiej jakości materiałów przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje jej wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie</li> <li>Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem</li> <li>Konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami</li> <li>Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiołki</li> </ul>			 	
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Igła wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej</li> <li>Nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami)</li> <li>Igła oznaczona znakiem CE w pełni odpowiada wymaganiom normy PN-EN-ISO 7864</li> <li>Dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18G (1,2 x 30 mm)</li> <li>Jednorazowego użytku;</li> <li>Opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, typu blister-pack</li> <li>Sterylizowana tlenkiem etylenu</li> <li>Termin ważności: 5 lat</li> </ul>				
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	HPP - 1830	1,2 x 30 mm	Różowy	100 sztuk	100 x 100 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Conall Health Co., Limited				



## Bezpieczne igły do pobierania BD™ Blunt Fill

*Igły do pobierania BD™ Blunt Fill z lub bez filtra zapewniają użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa.*




- tępe, polerowane elektronicznie ścięcie pod kątem 40° pozwala ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka w przypadku fiolek wielodawkowych
- dzięki ukośnie ściętemu ostrzu łatwo daje się wprowadzić do fiołki (np. wielodawkowej)
- wyraźne barwne oznaczenie nasadki igły i osłonki ochronnej
- igła do pobierania BD™ Blunt Fill z filtrem jest wyposażona w filtr 5 µm. W porównaniu z igłami bez filtra wyraźnie zredukowane jest ryzyko pobierania cząsteczek stałych (np. fragmentów gumy lub szkła)
- produkt o numerze katalogowym 303129: sterylizowane tlenkiem etylenu
- produkty o numerach katalogowych 305181 i 305211: sterylizowane promieniami gamma
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV

rozmiar Gauge	średnica zewnętrzna (mm)	długość (mm)	ostrze	kod barwny	nr katalogowy	box/ karton
<b>bezpieczna igła do pobierania BD™ Blunt Fill</b>						
18G 1 1/2"	1,2	40	tępa	czerwony	303129	100/5000
18G 1"	1,2	25	tępa	czerwony	305181	100/1000
<b>bezpieczna igła do pobierania BD™ Blunt Fill z filtrem 5 µm</b>						
18G 1 1/2"	1,2	40	tępa	fioletowy	305211	100/1000

# Silikonowa sonda Sengstaken - Blakemore

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group sp. z o.o. sp. k.

WYTWÓRCA: Create Medic Co. Ltd., Japonia

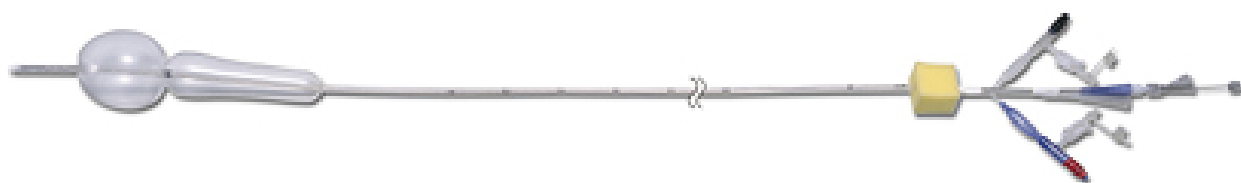

## OPIS PRODUKTU:

- **Wykonana z silikonu**  
Wyjątkowa elastyczność i miękkość sondy zapewnia łatwe zakładanie oraz wyjmowanie bez zagrożenia uszkodzeniem błony śluzowej przełyku
- **4-światłowa**  
Możliwość odessania oraz usunięcia zawartości żołądka dzięki dużemu światłu kanałów
- **Prowadnica**  
Istotnym jest, aby utrzymywać kinetykę krążenia i przepływu krwi w wątrobie, gdy nagle wystąpi krwawienie. Szczególnie trudno jest zlokalizować miejsce krwawienia, dlatego też musi ono zostać zastopowane za pomocą sondy Sengstakena. Sonda Sengstakena wyposażona jest w prowadnicę, dzięki czemu jej założenie jest znacznie szybsze w porównaniu do standardowych sond.
- **Balon przełyku zapewnia bezpieczną i szybką hemostazę**  
Niskociśnieniowy balon o wewnętrznym ciśnieniu nie przekraczającym 40mm Hg, o średnicy 32mm. Jeśli długość całkowita balonu jest mniejsza niż 140mm
- **Wyposażona w gąbkową podkładkę**  
Sondy wyposażone są w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru
- **Znaczniki głębokości**  
numeryczne na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm od początku balonu przełykowego
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

## ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Rozmiar	Średnica zewnętrzna/ długość	Otwory boczne	Balon żołądkowy	Balon przełykowy
002-182-0400	16F	5,3/850mm	3 żołądkowe, 2 przełykowe	Długość 60mm	Długość 140mm
002-182-0420	18F	6,0/850mm			
002-182-0440	20F	6,7/850mm			



ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

tel. 32 376 07 20, fax 32 376 07 07, e-mail: zarys@zarys.pl  
NIP 6481997718, REGON:273295877, KRS NR 0000540772



# PORT BEZIGŁOWY sterylny TD-48

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2019-03-05

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób stosuje się do zamknięcia portów infuzyjnych
- Przeznaczony jest do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynnych leków, pobrania próbek krwi)
- Zabezpiecza linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylniej terapii infuzyjnej
- Nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających
- Dedykowany dla standardowych złączy luer i luer lock



## WŁAŚCIWOŚCI:

- Obudowa wykonana z transparentnego (przezroczystego) materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Długość portu 24mm
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Zerowy wypływ wsteczny, bez wyrzutu pozytywnego
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt.

## KOD

NUMER KATALOGOWY	TYP	OPAKOWANIE
PB-N	niebieski	100 szt
PB-T	transparentny	100 szt



# SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA, DREWNIANA niesterylna

TD-35-I.2.c-2.2

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób jednorazowego użytku stosowany do diagnostycznego badania jamy ustnej

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonana z drewna brzoźowego
- zaokrąglone brzegi oraz krawędzie zapobiegające przed zranieniem
- kolor naturalny
- daleki zasięg dzięki odpowiedniej długości
- wytrzymała
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
SLN-001	150 x 17 mm	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.


Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2021.01

# PATYCZKI HIGIENICZNE

---

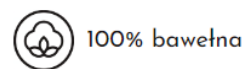

Najwyższej jakości patyczki higieniczne Cleanic są wykonane z lekkiego, wytrzymałego tworzywa. Na końcówkach patyczka znajduje się odpowiednia i bardzo dobrze przymocowana warstwa bawełny. Dzięki temu patyczki Cleanic zapewniają komfort stosowania każdego dnia.

Znak „100% czystej bawełny” potwierdza wysoką jakość naszych patyczków, a różnorodność opakowań pozwala wybrać odpowiedni produkt.

Długość patyczków 8cm.

Opakowanie zawiera 200 sztuk.

Skład: bawełna, PP/LDPE.

Producent:

**Harper Hygienics S.A.**



Greatcare  
Creating a Better Care

## Jednorazowe medyczne maszynki do golenia

**WYTWÓRCA:** Ningbo Greatcare

**DYSTRYBUTOR:** Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.

**KOD:**

- Maszynki do golenia jednorazowego użytku, plastikowe, z pojedynczym ostrzem;

GCS000101- **niebieskie**, ostrze ze stali nierdzewnej;

GCS000102- **granatowe**, ostrze ze stali nierdzewnej;

GCS000103- **zielone**, ostrze ze stali nierdzewnej;

- Maszynki do golenia jednorazowego użytku, plastikowe, z podwójnym ostrzem;

GCS010101- **niebieskie**, ostrze ze stali nierdzewnej;

GCS010102- **granatowe**, ostrze ze stali nierdzewnej;

GCS010103- **zielone**, ostrze ze stali nierdzewnej;



Wyroby są niejałowe, dostępne w różnych kolorach.

Ostrze pozwala na golenie na sucho i mokro.



ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland  
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84  
[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)



- Wykonane z polietylenu
- Posiadają chropowatą powierzchnię oraz wytrzymały na rozerwanie zgrzew
- Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
- Rozciągliwość min. 130%
- Wytrzymałość na rozciąganie min. 10 MPa
- Występują w rozmiarach: M - damskie, L – męskie
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością
- Opakowanie jednostkowe w formie woreczka umożliwiającego pojedyncze wyjmowanie rękawic
- Występują w rozmiarach: M - damskie, L – męskie
- Jednorazowego użytku

	KOD	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
ROZMIAR I KOD:	BS-RF-M	M	280 mm	100 szt.
	BS-RF-L	L	300 mm	100 szt.
WYTWÓRCA:	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa			





# WOREK NA WYMIOCINY

TD-58-I.2.c-1

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22


**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób jednorazowego użytku przeznaczony do zbiórki treści żołądkowej podczas wymiotów u pacjenta.

## WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny
- szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
- obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”
- pojemność całkowita worka: 2000 ml
- dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
- nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat

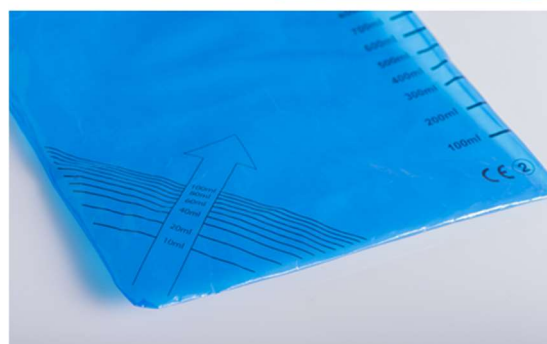

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE	
WW-01	2000 ml	niebieski	pośrednie transportowe	20 szt. (folia) 30 x 20 (karton)
WW-02	2000 ml	czerwony	pośrednie transportowe	20 szt. (folia) 30 x 20 (karton)

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2021.01



JKMED Mariusz Kopel  
ul. Grunwaldzka 12/23  
41-800 Zabrze

## SZYNY PALCOWE

- Aluminiowe szyny unieruchamiające wykonane z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową.
- Szyny są plastyczne, łatwe do uformowania.
- Skutecznie zastępują opatrunki gipsowe.
- Niealergiczne, nietoksyczne.
- Przeznaczone są do unieruchomienia palców.
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarowej wg życzenia klienta m.in.

200x10, 200x15, 200x20, 200x25, 230x13, 230x15, 230x18, 230x20, 250x18, 250x20,  
250x25, 250x40, 260x20, 280x20, 300x 25, 300x20 (S), 400x20 (M), 400x40, 420x20, 450x20,  
450x25, 460x13, 460x20, 500x20 (L), 500x25, 500x40, 600x20, 600x25, 600x50

Nr kat. nie jest stosowany



# Kołnierz Schantza

TGO KS 101 – Kołnierz ortopedyczny miękki, typu Schantza



## Opis produktu

Jednoczęściowy miękki kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej wyprofilowanej anatomicznie. Zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa. Lekki i komfortowy w użytkowaniu. Przepuszczalny dla promieni X. Materiały przyjazne dla pacjenta. Dostępny w różnych wysokościach i obwodach dla indywidualnego dopasowania.

## Wskazania

- zwyrodnienia szyjnego odcinka kręgosłupa
- ostry lub chroniczny syndrom bolesności szyi
- dystorsja kręgów szyjnych
- zawroty głowy
- migrena
- leczenie uzupełniające w urazach żuchwy
- choroby reumatyczne kręgów szyjnych
- konieczność usztywnienia pooperacyjnego

## Parametry

Potrzebne wymiary:

- obwód szyi
- wysokość szyi



Obwód [cm]		Wysokość [cm]			
		7.5 cm	8.5 cm	10 cm	12 cm
S	30-35cm	TGO KS 101/75/S	TGO KS 101/85/S	TGO KS 101/100/S	TGO KS 101/120/S
M	36-41cm	TGO KS 101/75/M	TGO KS 101/85/M	TGO KS 101/100/M	TGO KS 101/120/M
L	42-47cm	TGO KS 101/75/L	TGO KS 101/85/L	TGO KS 101/100/L	TGO KS 101/120/L
XL	48-53cm	TGO KS 101/75/XL	TGO KS 101/85/XL	TGO KS 101/100/XL	TGO KS 101/120/XL

## Kody NFZ

Dysfunkcja stała 9170.20




Dysfunkcja czasowa 9180.16

Kołnierz unieruchamiający, jednoczęściowy,  
regulowany dla dorosłych ST-428



- ✓ regulowany, jednoczęściowy
- ✓ wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od wewnątrz miękką hypoalergiczną pianką
- ✓ duże otwory w części potylicznej i z przodu kołnierza umożliwiają lepszy dostęp do pacjenta (sprawdzenie tętna czy wykonanie konikotomii)
- ✓ możliwość prześwietlania i badania metodą rezonansu magnetycznego,
- ✓ regulacja rozmiaru kołnierza: czterostopniowa (dla dorosłych),
  - poziomy regulacji :
    - TALL – długa szyja
    - REGULAR –normalna szyja
    - SHORT – krótka szyja
    - NO-NECK – bardzo krótka szyja;

# CELDRAP SPUNLACED – Ręcznik włókninowy

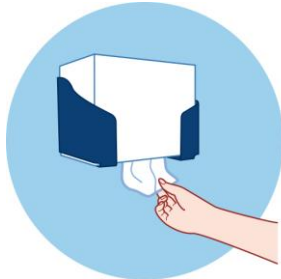WYTWÓRCA:	LAYERTEX, S.L. Cami dels francesos nr 4 08338 Premia de Dalt Barcelona				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do osuszania ciała u osób o wrażliwej skórze</li> <li>Do tradycyjnego mycia ciała</li> <li>Polecany szczególnie w placówkach medycznych, gdzie ich stosowanie pozwala zminimalizować ryzyko zakażeń krzyżowych</li> </ul>				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonany z miękkich i delikatnych włókien poliestrowych i sztucznego jedwabiu zagęszczanych techniką spunlaced</li> <li>Bardzo delikatny i miękki</li> <li>Rozmiar: 30 x 40 cm</li> <li>Gramatura: 45 g/m<sup>2</sup></li> <li>Grubość: 0,55 mm</li> <li>Opakowanie w formie dyspensera ułatwia wyjmowanie pojedynczych ręczników</li> <li>Dyspenser kompatybilny z uchwytem do powieszenia – system poprawia organizację w miejscu pracy oraz redukuje ryzyko kontaminacji powierzchni opakowania</li> <li>Nie zawiera lateksu</li> <li>Jednorazowego użytku</li> <li>Niesterylny</li> <li>Podwójny sposób pakowania: folia i kartonik</li> </ul>		 		
ROZMIAR I KOD:	NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	GRAMATURA	TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE
	TO3040SL055-85	30 x 40 cm	45g/m <sup>2</sup>	folia i kartonik	100 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: LAYERTEX, S.L. Cami dels francesos nr 4 08338 Premia de Dalt Barcelona				



easyFLOW LINE  
Przedłużacz do pompy infuzyjnej,  
bez ftalanów  
TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data 2021-09-16

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do terapii infuzyjnej
- Stosowany w celu przedłużenia linii infuzyjnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dren wykonany z transparentnego PVC
- Długość drenu 45 cm lub 150 cm
- Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński, fabrycznie zabezpieczone koreczkami
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / blister-pack



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DRENU	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DRENU	OBJĘTOŚĆ WYPEŁNIENIA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
P450-BF	45 cm	1,24 mm	2,4 mm	0,6 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.
P1500-BF	150 cm	1,24 mm	2,4 mm	1,9 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.



easyFLOW LINE AMBER  
Przedłużacz do pompy infuzyjnej,  
bursztynowy bez ftalanów  
TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data 2021-09-16

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do terapii infuzyjnej
- Stosowany w celu przedłużenia linii infuzyjnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dren wykonany z PVC
- Bursztynowe zabarwienie drenu chroni leki światłoczułe przed działaniem promieniowania UV
- Długość drenu 150 cm
- Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński, fabrycznie zabezpieczone koreczkami
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / blister-pack



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DRENU	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DRENU	OBJĘTOŚĆ WYPEŁNIENIA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
PB1500-BF	150 cm	1,24 mm	2,4 mm	1,9 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.



# KRANIK TRÓJDROŻNY sterylny

TD-39

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2018-01-26

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Do zarządzania przepływami płynów infuzyjnych w trakcie ich podawania
- Umożliwia przełączanie ścieżki przepływu wlewu infuzyjnego
- Do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą
- Do bezpośredniej podaży leku/płynu

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z poliwęglanu
- Transparentna obudowa
- Wyraźny optyczny identyfikator pozycji „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni
- Ciągłe, proste kanały przepływowe i optymalna średnica wewnętrzna zapewniają prawidłowy pomiar ciśnienia
- Obrotowa końcówka luer-lock
- Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami
- Odporny na lipidy
- Nie zawiera lateksu ani ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier/folia



## KOD

NUMER KATALOGOWY	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KT-002	niebieski	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.



easyFLOW IS przyrząd do infuzji, sterylny  
easyFLOW IS przyrząd do infuzji, bez ftalanów, sterylny

TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2018-07-26

zmiana: 2023-06-26

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 150 cm lub 180 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- wyrób dostępny również w wersji bez ftalanów
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu



**KOD I WERSJA**

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	DŁUGOŚĆ DRENU	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IS	z ftalanami	150 cm	1 szt.	250 szt.
IS-BF	bez ftalanów	150 cm	1 szt.	250 szt.
IS-BF-180	bez ftalanów	180 cm	1 szt.	250 szt.



**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- wyrób przeznaczony do połączenia z dojściem dożylnym w celu podawania światłoczułych płynów, roztworów leków oraz innych płynów ustrojowych podczas prowadzenia terapii infuzyjnej

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- bursztynowe zabarwienie drenu i komory kroplowej
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplicznik komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki i elastyczny dren o długości min. 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu



**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IS-BF-A	AMBER, bez ftalanów	10 szt.	10 x 10 szt.