

## System bariery sterylnej

### Włóknina sterylizacyjna SMS

#### Opis produktu

Jednorazowe opakowanie ze specjalnej, 3-warstwowej, miękkiej włókniny nowej generacji o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach.

Włóknina przeznaczona jest do sterylizacji parowej, plazmowej lub tlenkiem etylenu małych, średnich i dużych zestawów. Surowce użyte do produkcji włókniny charakteryzują się doskonałą przepuszczalnością czynnika sterylizującego połączoną z wysoką barierowością bakteriologiczną (przy podwójnym pakowaniu). Włóknina SMS cechuje się dużą miękkością i łatwością w układaniu.

Produkt oferowany jest w kolorze niebieskim i zielonym. Nie zawiera lateksu.

#### Sposób użycia

Należy zapakować wybrany zestaw narzędziowy, bielizniany lub inny, w dwie warstwy włókniny o różnych kolorach, zgodnie z przyjętymi zasadami zawijania. Gotowy pakiet zaleca się zabezpieczyć dodatkowo taśmą samoklejącą.

Następnie należy przeprowadzić proces sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta.

#### Obszary zastosowań



Sterylizatory parowe (STEAM) i gazowe (EO, PLASMA) różnego typu.

#### Zielona i niebieska włóknina sterylizacyjna SMS, 55g


SMS5550Z/N	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu
SMS5560Z/N	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu
SMS5575Z/N	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS5590Z/N	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS5510Z/N	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS5512Z/N	120 x 120 cm	200 szt. w opakowaniu

#### Wytwórca

Informer Med Sp. z o.o.

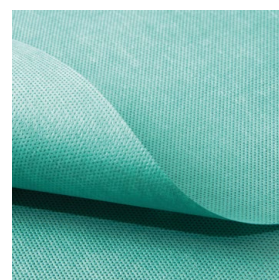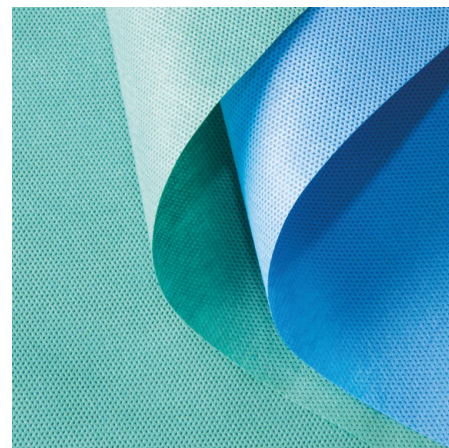

zielona

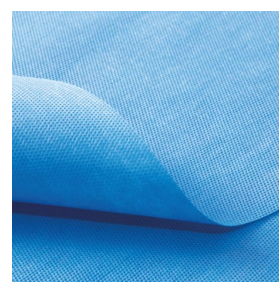

niebieska

#### normy

PN EN ISO 11607-1:2020,  
EN 868-2:2017  
Rozporządzenie 2017/745 (MDR)

#### przechowywanie i okres przydatności


Przechowywać w suchym miejscu,  
w temperaturze poniżej 30°C.  
Okres przydatności:  
5 lat od daty produkcji.


#### numer katalogowy i opakowanie


Data produkcji, znak CE i numer serii  
umieszczone na opakowaniu zbiorczym.  
Na produkcie umieszczony numer serii  
odpowiadający numerowi  
na opak. zbiorczym i dacie produkcji.


## System bariery sterylnej

Włóknina sterylizacyjna SMS - instrukcja

 Instrukcja zawijania zestawów- metoda 1:

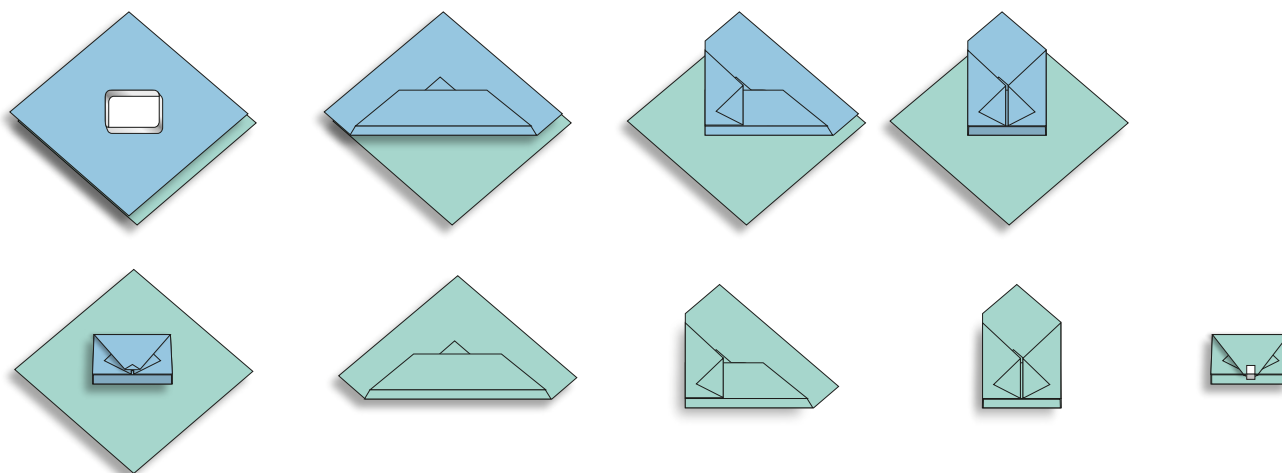

 Instrukcja zawijania zestawów- metoda 2:

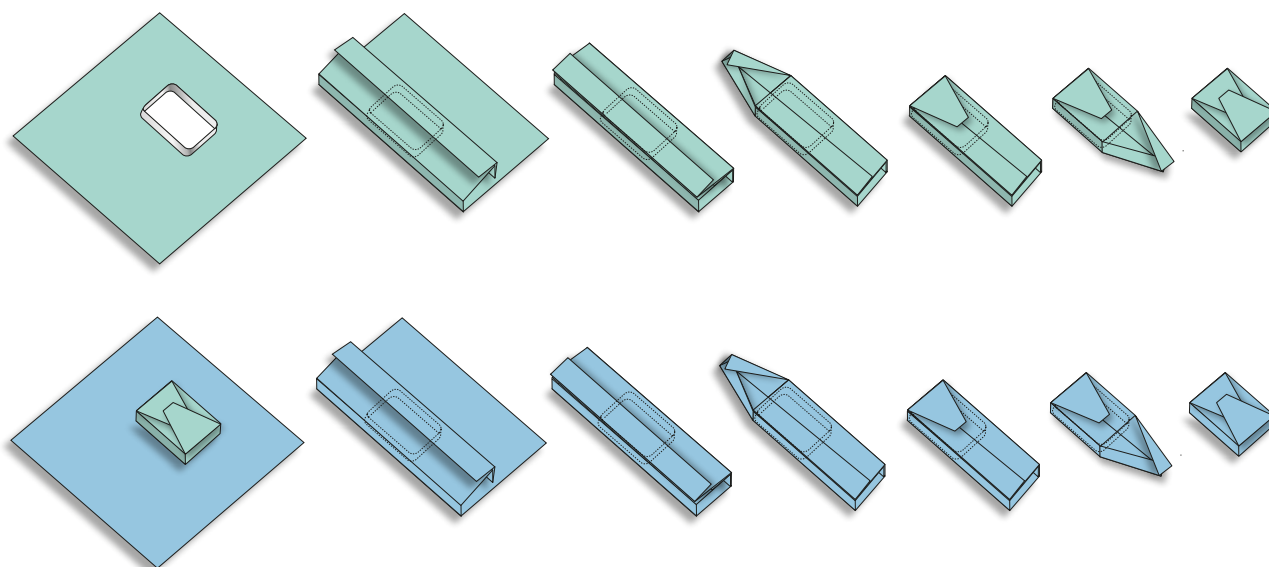

wytwórca:

**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)