


Wanny dezynfekcyjne

Do sporządzania roztworów oraz dezynfekcji,
mycia i transportu narzędzi medycznych
i wyposażenia endoskopowego.

- odporne na związki chemiczne zawarte w preparatach dezynfekcyjnych i myjących
- mogą być poddawane dezynfekcji termicznej do 70°C
- estetyczne, wykonane z wytrzymałych materiałów

Wanny dezynfekcyjne

Do sporządzania roztworów oraz dezynfekcji, mycia i transportu narzędzi medycznych i wyposażenia endoskopowego.

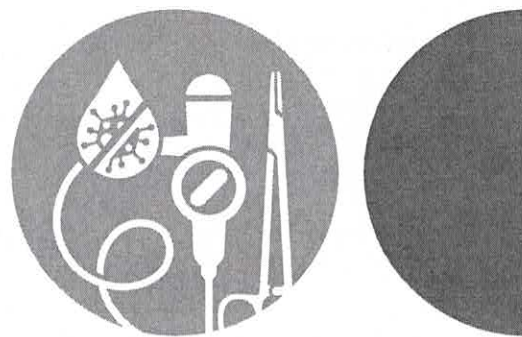

PODSTAWOWE CECHY

- różna pojemność wanien (1L, 5L, 16 L) umożliwia dobranie wielkości do potrzeb użytkownika i ekonomiczne dysponowanie środkami
- łatwe w użyciu i utrzymaniu w higienicznym stanie
- wykonane ze tworzywa sztucznego odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjących i dezynfekcyjnych oraz temperaturę do 70°C
- składają się z trzech elementów: wanny i sita wykonanych z polipropylenu (PP) oraz pokrywy wykonanej z polichlorku winylu (PVC)
- wyprofilowane uchwyty w wannie i sicie ułatwiają ich przenoszenie
- wewnętrzna podziałka wanny umożliwia dokładne dozowanie wody
- perforowane sito ułatwia płukanie narzędzi oraz ogranicza kontakt personelu z roztworem roboczym preparatów
- pokrywa szczelnie zabezpiecza przed parowaniem roztworu z wanienki
- w wannach 1L i 5L specjalne płytki dociskowe pomagają w całkowitym zanurzeniu narzędzi w roztworze środka
- mogą być przechowywane w temperaturach od -50°C do + 40°C (po przechowywaniu w pomieszczeniu poniżej 10°C wanna powinna się nagrzać w temp. pokojowej przez 30 min.)

	1 litr	5 litrów	16 litrów
Wymiary zewnętrzne			
długość	18,5-22,5 cm	32-39 cm	49-53 cm
szerokość	12,5-15 cm	21-26 cm	28-32 cm
wysokość	9 cm	16 cm	15-19 cm
Wymiary wewnętrzne			
długość	18 cm	32 cm	48 cm
szerokość	12 cm	21 cm	27 cm
wysokość	7 cm	12 cm	14 cm
Wymiary sita			
długość	14 cm	26 cm	43 cm
szerokość	11 cm	20 cm	24 cm
wysokość	6 cm	11 cm	12 cm


Karta techniczna produktu

Uniwersalny dozownik łokciowy MODEL: HS 1500-MED

Uniwersalny dozownik ścienny
z ramieniem dozującym

- ✓ wykonany z trwałych, wytrzymałych tworzyw – ABS i stal nierdzewna
- ✓ dedykowany do dozowania preparatów myjących, dezynfekujących oraz pielęgnujących
- ✓ dostosowany do butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml – specjalny adapter w komplecie
- ✓ regulacja objętości dozy – 0.6 ml, 1.3 ml, 2.0 ml
- ✓ wyposażony w płytkę montażową, kluczyk, opcjonalnie w podstawkę pod dozownik
- ✓ łokciowe dozowanie preparatu po naciśnięciu na ramię dozownika
- ✓ przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i kontrolę jego zużycia
- ✓ wymiary: wys. 335 mm, szer. 108 mm, głęb. 222 mm,

Opakowanie handlowe: 1 szt.

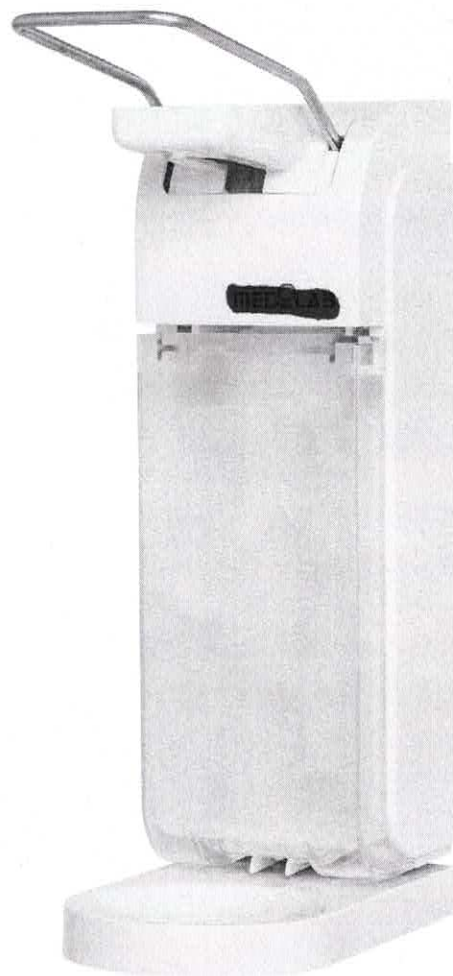




Dozownik tokciowy Sterisol

Estetyczny dozownik ścienny
z ramieniem dozującym.

- dostosowany do dozowania preparatów w workach o pojemności 700 ml
- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
- bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Dozownik łokciowy Sterisol

Estetyczny dozownik ścienny z ramieniem dozującym.

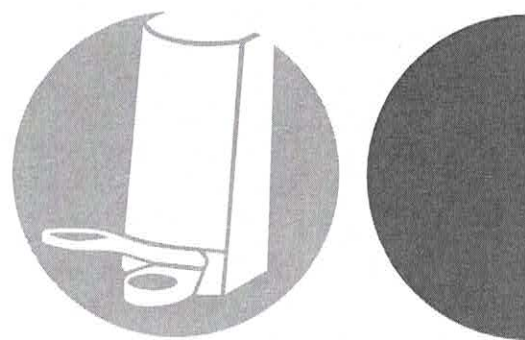

PODSTAWOWE CECHY

- dedykowany do dozowania preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących Systemu Sterisol
- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
- może być poddawany dekontaminacji w myjni - dezynfektorze
- montaż za pomocą wkrętów lub trwałej taśmy montażowej
- dozowanie polega na naciśnięciu ramienia dozującego na specjalny zawór-zastawkę
- możliwość dozowania za pomocą ramienia plastikowego (w zestawie), metalowego, mini lub przedłużonego (akcesoria dodatkowe)
- w zestawie: obudowa dozownika, płytki montażowa, przezroczysta pokrywa, plastikowe ramię dozujące, taśma montażowa, wkręty
- dostępne są również kolorowe dozowniki, które ułatwiają identyfikację stref w placówce medycznej: czerwony, niebieski, fioletowy, różowy, czarny, szary i z motywem na oddziały dziecięce

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYCIA

Montaż przy użyciu taśmy

- Najpierw dokładnie umyć i odłuszczyć powierzchnię, na której będzie montowany dozownik.
- Na płytkę montażową dozownika należy nakleić taśmę.
- Przykleić dozownik do powierzchni właściwej.

Montaż przy użyciu wkrętów

- Najpierw wywiercić otwory zgodnie z rozmieszczeniem na płytce montażowej.
- Płytkę montażową zamontować na powierzchni właściwej przy użyciu wkrętów.
- Do płytki zamontować dozownik.
- Oburącz unieść do góry przezroczystą pokrywę dozownika.
- Włożyć zawór-zastawkę worka w specjalną obręcz na obudowie dozownika. Następnie górną część worka, na której znajdują się otwory zawiesić na wypustkach obudowy dozownika.
- Sprawdzić czy worek z preparatem jest prawidłowo włożony do dozownika.
- Zamknąć oburącz przezroczystą pokrywę dozownika.

WYMIARY

wymiary obudowy dozownika
(wys. x szer. x głęb.):
200 mm x 100 mm x 110 mm
standardowe ramię dozujące (dł.):
140 mm

AKCESORIA DODATKOWE

metalowe ramię dozujące
mini ramię dozujące
przedłużone ramię dozujące
(stalowe, czerwone, niebieskie)

OPAKOWANIA

dozownik łokciowy Sterisol - 1 szt.

PRODUKTY DEDYKOWANE

MYCIE

Sterisol Ākta Liquid Soap
Sterisol Ultra Liquid Soap
Sterisol Sense Liquid Soap
Sterisol Ultra Hair & Body

DEZYNFEKCJA


Sterisol AHD 1000
Sterisol Phago`gel
Sterisol Preop
Sterisol Ethanol

PIELĘGNACJA

Sterisol Soft Skin Creme
Sterisol Gentle Skin Lotion



Dozownik automatyczny Sterisol

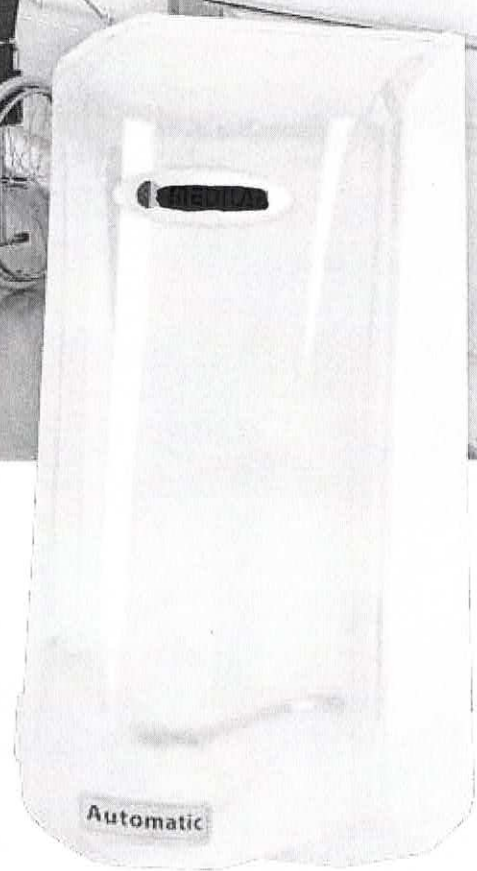


Bezdotykowy dozownik ścienny
z czujnikiem ruchu.

- dostosowany do dozowania preparatów w workach o pojemności 700 ml
- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
- bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Dozownik automatyczny Sterisol

Bezdotykowy dozownik ścienny z czujnikiem ruchu.

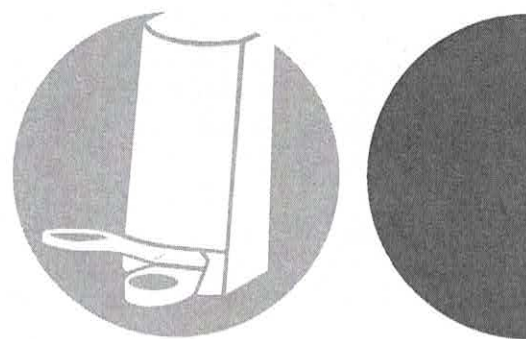

PODSTAWOWE CECHY

- dedykowany do dozowania preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących Systemu Sterisol
- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
- montaż za pomocą wkrętów lub trwałej taśmy montażowej
- dozowanie polega na uruchomieniu mechanizmu dozującego za pomocą czujnika ruchu
- zasilany przez baterie lub zasilacz sieciowy
- wyposażony w niebieską lampkę sygnalizującą wyczerpanie baterii
- w zestawie: obudowa dozownika, płytki montażowa, przezroczysta pokrywa, taśma montażowa, wkręty
- bezdotykowe dozowanie preparatów zapewnia zachowanie najwyższego stopnia higieny

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYCIA

Montaż przy użyciu taśmy

- Dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię, na której będzie montowany dozownik.
- Na płytkę montażową dozownika nakleić taśmę.
- Przykleić dozownik do właściwej powierzchni.

Montaż przy użyciu wkrętów

- Wywiercić otwory zgodnie z rozmieszczeniem na płytce montażowej.
- Płytkę montażową zamontować do właściwej powierzchni przy użyciu wkrętów.
- Do płytki zamontować dozownik.
- Oburącz unieść do góry przezroczystą pokrywę dozownika.
- Na górze obudowy dozownika znajduje się kasetka na baterie. Otworzyć ją w kierunku do siebie i włożyć 4 baterie, a następnie zamknąć.
- Przez ramię ze stali nierdzewnej włożyć zawór-zastawkę worka w specjalną obręcz na obudowie dozownika. Następnie górną część worka, w której znajdują się otwory zawiesić na wypustkach obudowy dozownika.
- Sprawdzić czy worek z preparatem jest prawidłowo włożony do dozownika.
- Zamknąć oburącz przezroczystą pokrywę dozownika.

WYMIARY

wymiary obudowy dozownika
(wys. x szer. x głęb.):
228 mm x 117 mm x 130 mm

AKCESORIA WYMIENNE

taśma montażowa, płytki montażowa,
przezroczysta pokrywa

OPAKOWANIA

dozownik automatyczny Sterisol – 1 szt.

PRODUKTY DEDYKOWANE

MYCIE

Sterisol Akta Liquid Soap
Sterisol Ultra Liquid Soap
Sterisol Sense Liquid Soap
Sterisol Ultra Hair & Body

DEZYNFEKCJA

AHD 1000 Sterisol
Phago'gel Sterisol
Sterisol Preop
Sterisol Ethanol

PIELĘGNACJA

Sterisol Soft Skin Creme
Sterisol Gentle Skin Lotion