

# Ahlstrom Munksjö

## System bariery sterylnej 99,9%

papier krepowany 60g/m<sup>2</sup>

### opis produktu

Jednorazowe opakowanie ze specjalnej krepki o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Surowce użyte do produkcji (pulpa celulozy) są w 100% naturalne, nie zawierają ołowiu, lateksu oraz substancji niebezpiecznych, a ich doskonała przepuszczalność jest połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną na poziomie 99,9% przy podwójnym pakowaniu. Produkt dedykowany jest do pakowania małych zestawów. Papier oferowany w kolorze białym, niebieskim i zielonym.

### sposób użycia

Należy zapakować wybrany zestaw narzędziowy, bielizniany lub inny, w dwie warstwy papieru o różnych kolorach, zgodnie z przyjętymi zasadami zawijania. Gotowy pakiet zaleca się zabezpieczyć dodatkowo taśmą samoklejącą. Następnie należy przeprowadzić proces sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta.

### obszary zastosowań


Sterylizatory parowe (STEAM) i gazowe (EO) różnego typu oraz formaldehyd.

### wytwórca

Ahlstrom Munksjö, Francja



biały

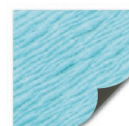

niebieski



zielony

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11607-1:2006, EN 868 Dyrektywa CE 93/42	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.	Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.  Na produkcie umieszczony numer serii odpowiadający numerowi na opakowaniu zbiorczym i dacie produkcji.

# Ahlstrom Munksjö

## System bariery sterylnej

papier krepowany 60g/m<sup>2</sup> - rozmiary

### biały papier krepowany

M4040B	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu	M9090B	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
M5050B	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	M1010B	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
M6060B	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	M1212B	120 x 120 cm	125 szt. w opakowaniu
M7575B	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	M1315B	130 x 150 cm	125 szt. w opakowaniu

### zielony papier krepowany

M5050Z	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	M1010Z	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
M6060Z	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	M1212Z	120 x 120 cm	125 szt. w opakowaniu
M7575Z	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	M1315Z	130 x 150 cm	125 szt. w opakowaniu
M9090Z	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu	M1414Z	140 x 140 cm	125 szt. w opakowaniu

### niebieski papier krepowany

M4040N	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu	M9090N	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
M5050N	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	M1010N	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
M6060N	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	M1212N	120 x 120 cm	125 szt. w opakowaniu
M7575N	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu			

### biały i zielony papier krepowany, naprzemiennie pakowany

M5050BZ	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	M9090BZ	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
M6060BZ	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	M1010BZ	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
M7575BZ	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	M1212BZ	120 x 120 cm	125 szt. w opakowaniu

### niebieski i zielony papier krepowany, naprzemiennie pakowany


M5050NZ	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	M9090NZ	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
M6060NZ	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	M1010NZ	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
M7575NZ	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	M1212NZ	120 x 120 cm	125 szt. w opakowaniu

# Ahlstrom Munksjö

## System bariery sterylnej

papier krepowany 60g/m<sup>2</sup> - instrukcja

### ■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 1:

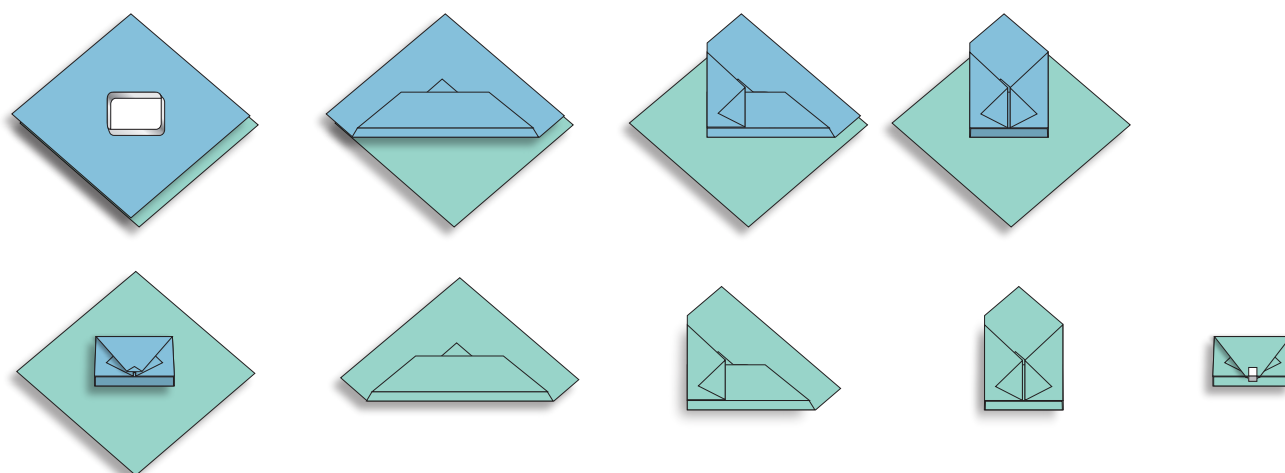

### ■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 2:

