

# Ahlstrom Munksjö

## System bariery sterylnej 99,9% włóknina 57g/m<sup>2</sup>

### ■ opis produktu

Jednorazowe opakowanie wykonane jest z kombinacji celulozy oraz włókien syntetycznych o zwiększonej odporności mechanicznej i gramaturze. Surowce użyte do produkcji to m.in. masa celulozowa, syntetyczne włókna i spoiwa lateksu syntetycznego, które charakteryzują się doskonałą przepuszczalnością czynnika sterylizującego połączoną z wysoką barierowością bakteriologiczną na poziomie 99,9% przy podwójnym pakowaniu. Włóknina cechuje się dużą miękkością i łatwością w układaniu. Miękka włóknina nowej generacji pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia. Stosowana jest do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu małych, średnich oraz dużych zestawów. Produkt oferowany jest kolorze niebieskim i zielonym.

### ■ sposób użycia



Należy zapakować wybrany zestaw narzędziowy, bielizniany lub inny, w dwie warstwy papieru o różnych kolorach, zgodnie z przyjętymi zasadami zawijania. Gotowy pakiet zaleca się zabezpieczyć dodatkowo taśmą samoklejącą. Następnie należy przeprowadzić proces sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta.

### ■ obszary zastosowań

Sterylizatory parowe (STEAM) i gazowe (EO) różnego typu.

### ■ wytwórca

Ahlstrom-Munksjö Nonwovens LLC  
Windsor Locks, CT - Stany Zjednoczone

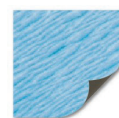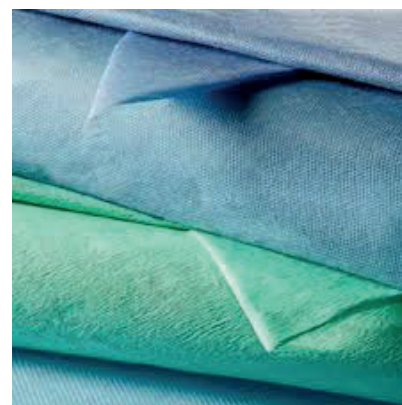

niebieski



zielony

■ normy	■ przechowywanie i okres przydatności	■ numer katalogowy i opakowanie
ISO 11607-1:2006, EN 868 Dyrektywa CE 93/42	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.	Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.  Na produkcie umieszczony numer serii odpowiadający numerowi na opakowaniu zbiorczym i dacie produkcji.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



### INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)

# Ahlstrom Munksjö

## System bariery sterylnej

włóknina 57g/m<sup>2</sup> - rozmiary

### ■ zielona włóknina, supermocna, nowej generacji, 57g/m<sup>2</sup>

NW574040Z	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu
NW575050Z	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu
NW576060Z	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu
NW577575Z	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu
NW579090Z	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
NW571010Z	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
NW572020Z	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
NW573050Z	130 x 150 cm	100 szt. w opakowaniu
NW571040Z	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu

### ■ niebieska włóknina, supermocna, nowej generacji, 57g/m<sup>2</sup>

NW574040N	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu
NW575050N	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu
NW576060N	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu
NW577575N	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu
NW579090N	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
NW571010N	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
NW572020N	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
NW573050N	130 x 150 cm	100 szt. w opakowaniu
NW571040N	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**


ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)

# Ahlstrom Munksjö


## System bariery sterylnej

włóknina 57g/m<sup>2</sup> - instrukcja

### ■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 1:

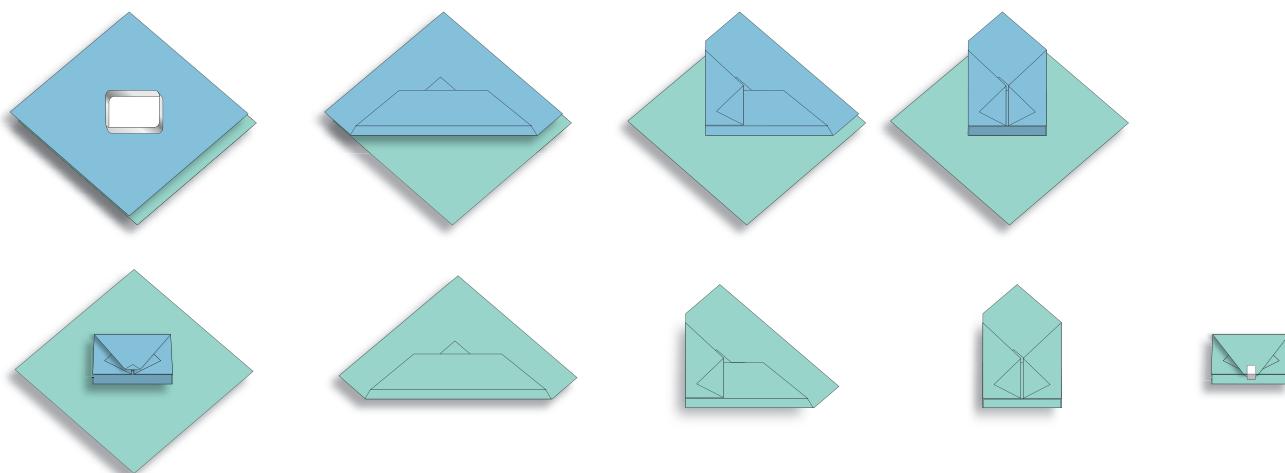

### ■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 2:

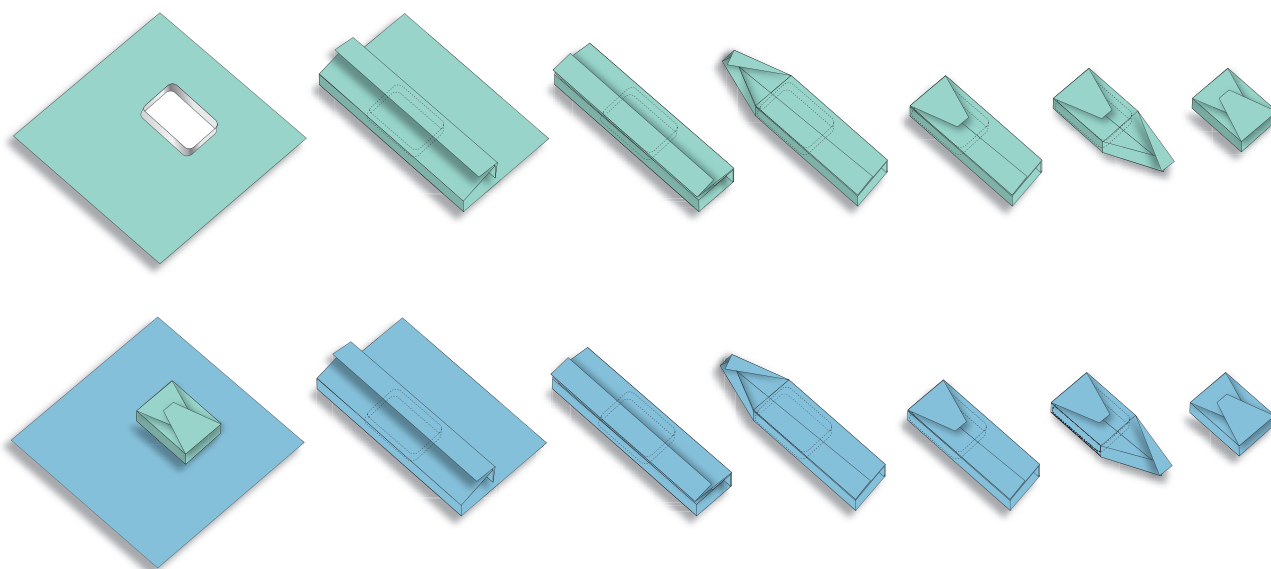

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)